



# COOLSHAPING™

Cooling Therapy Device




## ¿Como funciona?

El Coolshaping es una aparato medico que funciona en base al proceso de muerte celular apoptótica de los adipocitos inducida por frío. Consiste en exponer a las células grasas a un estímulo de frío que está por encima del punto de congelación pero por debajo de la temperatura corporal durante un período determinado, muriendo estas puesto que las células grasas suelen ser más sensibles al frío que otros tejidos.

Además del uso estético, es recomendado para tratar la pseudoginecomastia masculina.

## VENTAJAS

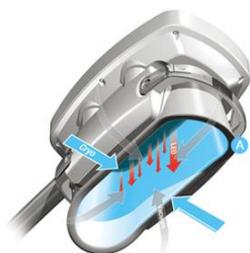

**A. Ofrece un tratamiento estable de energía fría y cómodo.**  
Tecnología Peltier de silicio.

**B. Dos Aplicadores de mano**  
Puede operar dos los dos aplicadores de mano por separado o simultáneamente. De este modo se puede tratar 2 partes al mismo tiempo.

**C. Potencia de vacío variable**  
4 niveles de potencia de vacío: 1 -4.

**D. Aplicadores de mano de diferentes medidas ( opcional )**  
Opcionalmente se puede proporcionar aplicadores de mano de diferentes medidas, lo que le permitirá elegir el aplicador mas adecuado según el tamaño del área de tratamiento. (mini, small, medium, large)

**E. Función de modo automático**  
El modo automático se puede configurar con 3 sencillos pasos.

## PIEZAS DE MANO DEL COOLSHAPING





# COOL SHAPING™

Cooling Therapy Device



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ESM-4700CS
Aplicadores	2 piezas de mano de tamaño mediano: 125 mm (ancho) x 189 mm (profundidad) x 138 mm (alto)
	Pieza de mano de gran tamaño (opcional): 125 mm (ancho) x 217 mm (profundidad) x 141 mm (alto)
	Pieza de mano de tamaño pequeño (opcional): 100 mm (ancho) x 146 mm (profundidad) x 111 mm (alto)
Pulso de Vacío	Potencia del 1 al 4
Temperatura de enfriamiento	-10 °C ~ 5 °C
Tiempo de tratamiento	01:00 ~ 60:00 minutos
Nivel de vacío	Nivel 1 a Nivel 10
Potencia de entrada	100~240 V CA, 220~240 V, 50/60 Hz (máx. 600 VA)
Panel	LCD de 10,2 pulgadas y pantalla táctil
Dimensión (An. x Pr. x Al. mm)	443,5 x 380 x 1067,2
Peso	60 kg

## CONTACTO COMERCIAL

Nombre : Gaby Avilez Palomino  
:  
Celular: : 947 217 210  
Correo : [gavilez@technomedicalperu.com](mailto:gavilez@technomedicalperu.com)