


Powershape 2



Cómo funciona

Powershape2 es un potente e innovador sistema 3 en 1 que utiliza sinérgicamente RF bipolar, láser de bajo nivel y rodillo de vacío para aliviar el dolor musculoesquelético, modelar el cuerpo, reducir la grasa y la celulitis e incluso aliviar dolores musculares menores. No es invasivo y está diseñado para adelgazar el cuerpo. Se puede operar en varias áreas del cuerpo, incluida la cara, con la pieza de mano de RF térmica recién agregada.

Tecnología

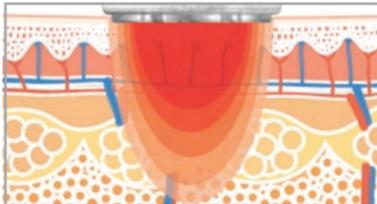


Frecuencia de radio

Powershape 2 está diseñado para entregar energía térmica profundamente en la capa dérmica y enviar ondas electromagnéticas. La energía térmica generada reduce las células grasas y ayuda a adelgazar el cuerpo. Con una pieza de mano de RF bipolar y una pieza de mano de RF multipolar juntas, puede tratar varias áreas del cuerpo.



Vacío

La potente función de vacío aumenta la circulación sanguínea al succionar las áreas objetivo y unifica la piel para optimizar el suministro eficiente de energía de RF. El vacío induce el drenaje linfático, suaviza el cuerpo y ayuda a reducir la celulitis.

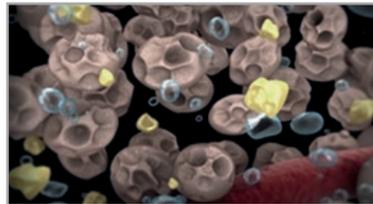

Láser de bajo nivel

Mediante la entrega de longitudes de onda específicas de luz láser, Powershape 2 reduce significativamente el tamaño de las células grasas para desestabilizarlas y luego descomponerlas a través del proceso natural del propio cuerpo. Crea efectos de sinergia para adelgazar el cuerpo y maximiza los efectos de reducción de grasa.

Ventajas



- A. Cable suave y flexible:** Hecho de material suave y flexible.
- B. Amplia pantalla LCD, interfaz de usuario fácil y conveniente:** Con su pantalla táctil digital de 10,2 pulgadas, puede comprobar fácilmente la pantalla durante el tratamiento. La interfaz de usuario simple se aplica para conveniencia del usuario
- C. Rollo de pieza de mano:** La pieza de mano de rodillo motorizada asistida por vacío bipolar permite que la energía láser y de RF se oriente con precisión donde puede tener el máximo efecto
- D. Pieza de mano multipolar para el cuerpo:** Empleando 4 o más electrodos para suministrar corriente al tejido de la piel. Esta pieza de mano multipolar asistida por vacío para el cuerpo es capaz de calentar simultáneamente las capas superficiales y profundas de la piel al entregar una corriente enfocada pero uniforme a la piel.
- E. Pieza de mano térmica:** Aumento de la conductividad de la energía térmica que reduce el tiempo de tratamiento gracias a las puntas bipolares recubiertas de cerámica.
- F. Almacenamiento de piezas de mano:** Puede almacenar las piezas de mano en el almacenamiento de piezas de mano dentro del dispositivo para evitar la pérdida de los componentes y mantenerlos en buen estado.

Accesorios

Thermal Tip(L)	Thermal Tip(S)	Thermal handpiece	Multipolar handpiece(S)
Multipolar handpiece(M)	Multipolar handpiece(L)	Roll handpiece	

Imagen clínica



Especificaciones

Tipo	Radio frecuencia, Vacuum, láser
Aplicadores	Roll Handpiece, Multi-Polar Handpiece, Thermal Handpiece
Panel	10.2 inch, pantalla digital
Dimensión (W x D x Hmm)	414 x 523 x 1,230
Peso	60 kg

Video